

CARDIOVIT CS-104

Le système de test d'effort intégré




SCHILLER
The Art of Diagnostics

CARDIOVIT CS-104

Tout ce dont vous avez besoin
en un seul système:

- Acquisition ECG sans fil
- Spirométrie à ultrasons (en option) avec le SpiroScout SP plus
- Station de travail intégrée pour la relecture des données

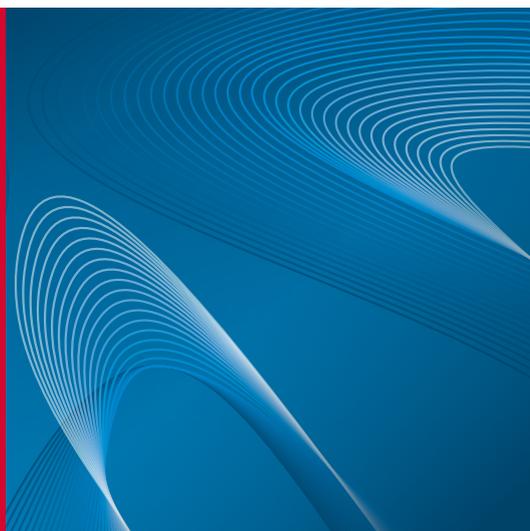

TOUTES LES OPTIONS EN UN SEUL SYSTÈME

- ECG de repos avec le programme d'analyse ETM de SCHILLER ainsi qu'ETM Sport, le programme d'interprétation automatique pour athlètes
- Jusqu'à 60 minutes d'enregistrement du rythme de repos, avec détection de l'arythmie en option
- ECG Framer : ECG de repos de 10 secondes à partir du rythme de repos
- Test d'effort avec détection d'arythmie en option
- Test d'effort pharmacologique
- Vecteur ECG (en option)
- Spirométrie basée sur la technologie ultrasonique du SpiroScout SP plus (option)



STATION DE TRAVAIL INTÉGRÉE POUR LA RELECTURE DES DONNÉES

Le CARDIOVIT CS-104 propose de vastes fonctions de revisualisation et d'édition ainsi que la préparation de rapports finaux. Les données acquises localement et les enregistrements d'autres appareils ECG de repos SCHILLER et de systèmes de test d'effort connectés au SCHILLER Server peuvent être consultés. Une connectivité bidirectionnelle (liste de travail et requête de données patients incluses) est établie avec les systèmes DME, SIH et PACS.

Spiromètre à ultrasons
SpiroScout SP plus

ECG SANS-FIL

Le module sans fil MS-12 blue en option simplifie considérablement l'acquisition d'ECG, tout en permettant à l'utilisateur de procéder librement dans n'importe quel environnement et tout en réduisant les artefacts de mouvement à un minimum. Qu'il soit allongé ou qu'il court sur le tapis, le patient peut bouger librement et remarque à peine ce petit appareil léger (115 g).

QUALITÉ SUISSE – PRÊT À UTILISER

L'unité comprend un PC, un moniteur, un chariot et un module d'acquisition sans fil (MS-12 blue) ou filaire (MS-12 USB). Le CARDIOVIT FT-1 en option peut être utilisé pour l'acquisition d'ECG. Le système est entièrement pré-installé et testé par SCHILLER, et donc prêt à l'emploi pour la pratique clinique.

Le CARDIOVIT CS-104 est également disponible comme logiciel PC d'ECG de repos, avec modules de test d'effort et de spirométrie en option.

Interface utilisateur intuitive et personnalisable :

- ❖ Choisir parmi les différents affichages d'EKG
- ❖ Activer ou désactiver les graphiques de tendance
- ❖ Sélectionner les boutons d'action

Hauteur de travail réglable de 88 à 122 cm grâce à un mécanisme à ressort

Module d'acquisition EKG sans fil, compact et puissant, avec affichage du signal à l'écran et assistant d'installation

Bac transparent pour le stockage et le transport d'accessoires médicaux

Roulettes pivotantes pour manœuvrer le chariot en douceur





Americas
SCHILLER Americas Inc.
Doral, Florida 33172

North America:
Phone +1 786 845 06 20
Fax +1 786 845 06 02
sales@schilleramericas.com
www.schilleramericas.com

Latin America & Caribbean
Phone +1 305 591 11 21
Fax +1 786 845 06 02
sales@schilleramericas.com
www.schilleramericas.com



France
SCHILLER Médical
F-67160 Wissembourg
Phone +33 3 88 63 36 00
info@schiller.fr
www.schiller.fr



France (distribution France)
SCHILLER France S.A.S.
F-77608 Bussy St Georges
Phone +33 1 64 66 50 00
contact@schillerfrance.fr
www.schiller-france.com



Serbia
SCHILLER d.o.o.
11010 Beograd
Phone +381 11 39 79 508
info@schiller.rs
www.schiller.rs



Slovenia
SCHILLER d.o.o.
2310 Slovenska Bistrica
Phone +386 2 843 00 56
info@schiller.si
www.schiller.si



Asia
SCHILLER Asia-Pacific / Malaysia
52200 Kuala Lumpur, Malaysia
Phone +603 6272 3033
sales@schiller.com.my
www.schiller-asia.com



Germany
SCHILLER Medizintechnik GmbH
D-85622 Feldkirchen b. München
Phone +49 89 62 99 81 0
info@schillermed.de
www.schillermed.de



Spain
SCHILLER ESPAÑA, S.A.
ES-28232 Las Rozas/Madrid
Phone +34 91 713 01 76
schiller@schiller.es
www.schiller.es



Austria
SCHILLER Handelsgesellschaft m.b.H.
A-4040 Linz
Phone +43 732 70 99 0
sales@schiller.at
www.schiller.at



India
SCHILLER Healthcare India Pvt. Ltd.
Mumbai – 400 059, India
Phone +91 22 6152 3333 / 2920 9141
sales@schillerindia.com
www.schillerindia.com



Switzerland
SCHILLER Schweiz AG
CH-8912 Obfelden
Phone +41 44 744 30 00
sales@schiller-schweiz.ch
www.schiller-schweiz.ch



China
Alfred Schiller (Beijing) Medical Technology
Co., Ltd.
100102 Beijing, China
Phone +86 10 84565453
info@schillerchina.com
www.schillermedical.cn



Poland
SCHILLER Poland Sp. z o.o.
PL-02-729 Warszawa
Phone +48 22 843 20 89 / +48 22 647 35 90
schiller@schiller.pl
www.schiller.pl



Turkey
SCHILLER TÜRKIYE
Okmeydani-Sisli – Istanbul
Phone +90 212 210 8681 (pbx)
Fax +90 212 210 8684
info@schiller.com.tr
www.schiller-turkiye.com



Croatia
SCHILLER d.o.o.
10000 Zagreb
Phone +385 1 309 66 59
info@schiller.hr
www.schiller.hr



Russia & C.I.S.
AO SCHILLER.RU
119049 Moscow, Russia
Phone +7 (495) 970 11 33
mail@schiller.ru
www.schiller.ru



United Kingdom
SCHILLER UK Ltd.
Anstruther, Fife KY10 3H
Phone +44 1333 312150
sales@schilleruk.com
www.schilleruk.com

SCHILLER se réserve le droit de modifier la conception, les spécifications et les caractéristiques présentées, ou d'interrompre le produit décrit à tout moment sans préavis ni obligation. Les images peuvent être représentatives. Certains produits peuvent ne pas être autorisés par voie réglementaire ou mis en vente sur tous les marchés. Contactez votre représentant SCHILLER pour les informations les plus récentes et la disponibilité.

