

SpiroScout SP plus

Mejore su ECG con mediciones de espirometría por ultrasonidos



SPIROSCOUT SP PLUS

Añada espirometría a su dispositivo ECG fácilmente con SpiroScout SP plus:

- ❖ Tecnología de ultrasonidos de GANSHORN de precisión
- ❖ Sin calibración
- ❖ Sin periodo de calentamiento ni piezas móviles

SpiroScout SP plus mejora la eficiencia de su consulta añadiendo mediciones de espirometría al dispositivo ECG de SCHILLER, lo que significa utilizar la misma plataforma para dos pruebas diferentes. Disfrutará de las ventajas de un ECG y un espirómetro con todas sus funciones, con los datos organizados de la misma forma para facilitar su gestión.

SpiroScout SP plus incorpora un sensor de flujo de ultrasonido para medir el flujo de aire que entra y sale de los pulmones del paciente. La tecnología de ultrasonidos elimina los problemas

asociados a los métodos tradicionales de medición de flujo: no hay piezas móviles ni placas para recoger esputos ni piezas desechables que calibrar.

La medición de flujo de ultrasonido es independiente de la composición, presión y humedad del gas y elimina los errores asociados a estas variables. La boquilla ScoutTube desechable permite que los impulsos de ultrasonido viajen entre los transductores.

La ScoutTube desechable no realiza ninguna función de medición, por lo que no requiere calibración.

DESECHABLE Y SOSTENIBLE

Para garantizar la sostenibilidad del producto, SCHILLER realiza una contribución a la protección climática por las boquillas ScoutTube y los filtros SpiroDef ScoutTube.


Engaged for Impact
Product
myclimate.org/01-20-162037



VENTAJAS EXCLUSIVAS DE LA TECNOLOGÍA DE ULTRASONIDOS DE GANSHORN:

Ventajas de la tecnología de ultrasonidos

- ❖ El sensor no está en contacto con la muestra
- ❖ No le afectan la humedad, la presión barométrica ni la contaminación
- ❖ Sin calibración
- ❖ No es necesario limpiar los sensores / filtros, sin mantenimiento
- ❖ Los consumibles son sencillos y económicos
- ❖ Precisión extremadamente alta para flujos bajos
- ❖ Sin tiempos de inactividad

Inconvenientes de la Tecnología tradicional*

- ❖ El sensor siempre está en contacto con la muestra
- ❖ Extremadamente sensible a la contaminación (errores de medición)
- ❖ Necesita calibración periódica
- ❖ Necesita limpieza
- ❖ Detección limitada de flujos bajos
- ❖ Tiempos de inactividad para mantenimiento

*turbina, neumotacómetro, hilo caliente



CARDIOVIT FT-2



CARDIOVIT CS-104




CARDIOVIT CS-104 Spiro



CARDIOVIT AT-102 G2



SPIROVIT SP-1 G2

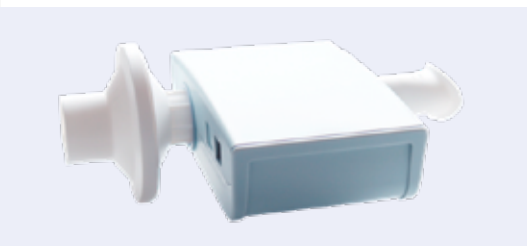

SCOUTTUBE

- ❖ Consumible higiénico para un único paciente para el control total de la contaminación
- ❖ Forma oval para optimizar el cierre de los labios y la posición de los dientes
- ❖ Forma cónica para adaptarse a bocas de distintos tamaños

FILTRO SPIRODEF SCOUTTUBE

- ❖ Consigue resultados precisos, reproducibles y sin fugas
- ❖ Protección contra la contaminación cruzada y protección adicional para operadores y técnicos





Americas
SCHILLER Americas Inc.
Doral, Florida 33172

North America:
Phone +1 786 845 06 20
Fax +1 786 845 06 02
sales@schilleramericas.com
www.schilleramericas.com

Latin America & Caribbean
Phone +1 305 591 11 21
Fax +1 786 845 06 02
sales@schilleramericas.com
www.schilleramericas.com



France
SCHILLER Médical
F-67160 Wissembourg
Phone +33 3 88 63 36 00
info@schiller.fr
www.schiller.fr



France (distribution France)
SCHILLER France S.A.S.
F-77608 Bussy St Georges
Phone +33 1 64 66 50 00
contact@schillerfrance.fr
www.schiller-france.com



Serbia
SCHILLER d.o.o.
11010 Beograd
Phone +381 11 39 79 508
info@schiller.rs
www.schiller.rs



Slovenia
SCHILLER d.o.o.
2310 Slovenska Bistrica
Phone +386 2 843 00 56
info@schiller.si
www.schiller.si



Asia
SCHILLER Asia-Pacific / Malaysia
52200 Kuala Lumpur, Malaysia
Phone +603 6272 3033
sales@schiller.com.my
www.schiller-asia.com



Germany
SCHILLER Medizintechnik GmbH
D-85622 Feldkirchen b. München
Phone +49 89 62 99 81 0
info@schillermed.de
www.schillermed.de



Spain
SCHILLER ESPAÑA, S.A.
ES-28232 Las Rozas/Madrid
Phone +34 91 713 01 76
schiller@schiller.es
www.schiller.es



Austria
SCHILLER Handelsgesellschaft m.b.H.
A-4040 Linz
Phone +43 732 70 99 0
sales@schiller.at
www.schiller.at



India
SCHILLER Healthcare India Pvt. Ltd.
Mumbai – 400 059, India
Phone +91 22 6152 3333 / 2920 9141
sales@schillerindia.com
www.schillerindia.com



Switzerland
SCHILLER Schweiz AG
CH-8912 Obfelden
Phone +41 44 744 30 00
sales@schiller-schweiz.ch
www.schiller-schweiz.ch



China
Alfred Schiller (Beijing) Medical Technology
Co., Ltd.
100102 Beijing, China
Phone +86 10 84565453
info@schillerchina.com
www.schillermedical.cn



Poland
SCHILLER Poland Sp. z o.o.
PL-02-729 Warszawa
Phone +48 22 843 20 89 / +48 22 647 35 90
schiller@schiller.pl
www.schiller.pl



Turkey
SCHILLER TÜRKIYE
Okmeydani-Sisli – Istanbul
Phone +90 212 210 8681
info@schiller.com.tr
www.schiller-turkiye.com



Croatia
SCHILLER d.o.o.
10000 Zagreb
Phone +385 1 309 66 59
info@schiller.hr
www.schiller.hr



Russia & C.I.S.
AO SCHILLER.RU
119049 Moscow, Russia
Phone +7 (495) 970 11 33
mail@schiller.ru
www.schiller.ru



United Kingdom
SCHILLER UK Ltd.
Bromborough, Wirral,
Merseyside, CH62 3RJ
Phone +44 1333 312150
sales@schilleruk.com
service@schilleruk.com
www.schilleruk.com

SCHILLER se reserva el derecho a realizar cambios en el diseño, las especificaciones y las características mostradas, o a suspender la fabricación del producto descrito en cualquier momento y sin previo aviso ni obligación. Las imágenes pueden ser representativas. Algunos productos pueden no estar autorizados por la normativa o no estar a la venta en todos los mercados. Póngase en contacto con su representante de SCHILLER para obtener la información y la disponibilidad más actuales.

