

# medilogFD

ECG Holter 12 dérivations pour une analyse tridimensionnelle de la santé cardiaque




**SCHILLER**  
The Art of Diagnostics

# medilogFD

L'enregistreur Holter qui complète votre gamme medilog :

- ∴ L'ECG Holter 12 dérivations permet d'évaluer l'ensemble des conditions ECG cardiaques
- ∴ Détection instantanée de fibrillation auriculaire/flutter auriculaire basée sur une analyse fine de l'onde P
- ∴ Capteur SpO<sub>2</sub> en option pour des informations respiratoires supplémentaires

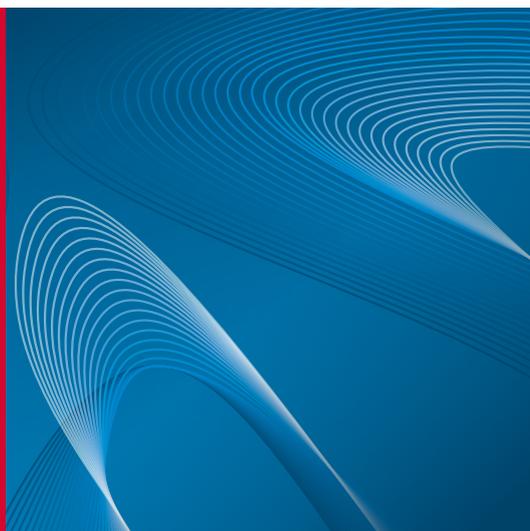

Housse de transport facile à nettoyer

## ECG HOLTER 12 DÉRIVATIONS POUR UNE ANALYSE TRIDIMENSIONNELLE

L'ECG Holter 12 dérivations est privilégié pour l'analyse cardiaque détaillée et tridimensionnelle. Les médecins, cardiologues et électrophysiologistes apprécient la technologie de pointe :

- ∴ Évaluation régionale de l'ischémie myocardique. Distinction de la région antérieure, septale, latérale, inférieure dans le cadre dynamique de la vie quotidienne.
- ∴ Identification de l'origine des battements ectopiques, qu'ils proviennent du ventricule gauche ou droit.

Supérieur dans l'identification des battements cardiaques anormaux qui commencent dans l'oreillette droite ou gauche.

## CONÇU POUR SUPPRIMER LES ARTÉFACTS

L'enregistreur Holter medilogFD offre une fréquence d'échantillonnage supérieure de 128 000 Hz pour ECG de repos sur 12 dérivations. Il est utilisé pour l'analyse de l'onde P en temps réel, la suppression sophistiquée des artéfacts et la détection de mouvement, permettant une évaluation rapide.

## APPROCHE HOLISTIQUE

La détection instantanée de l'apparition de la fibrillation auriculaire, l'analyse des épisodes respiratoires et la HRV (variabilité de la fréquence cardiaque) haute résolution ne sont que quelques-unes des caractéristiques exceptionnelles du medilogFD.

## CONCEPT DE DOUBLE BATTERIE

La batterie interne de haute qualité se recharge via USB ou sans fil sur une station de charge en option. De plus, des piles AAA standard facilement disponibles peuvent être utilisées. Cela permet aux patients d'être dépistés pendant cinq jours maximum sur une seule charge.

## COMPLÈTE LE PORTE- FEUILLE MEDILOG

medilogFD complète votre gamme medilog avec medilogAR (ECG Holter à 3 dérivations, jusqu'à 14 jours d'enregistrement) et medilog DARWIN2 (logiciel d'analyse ECG haut de gamme).

Écran couleur à contraste élevé pour une utilisation facile. Aperçu ECG en temps réel : 3 canaux affichés à la fois, les 12 canaux peuvent être parcourus

Contrôle du signal multifacteur basé sur :

- ❖ Impédance
- ❖ Amplitude
- ❖ Quantité de bruits

Microphone pour enregistrer l'ID du patient. Lors d'un départ anonyme, un enregistrement vocal est indispensable pour éviter toute confusion entre les patients.

Résistant aux chocs grâce à sa conception robuste

Boutons larges et faciles à utiliser

Marqueurs de position visibles et tactiles pour une connexion aisée du câble patient

Écologique : fonctionne avec une batterie interne rechargeable ou, si nécessaire, avec des piles AAA normales pour des délais d'exécution rapides

Échange de données via USB avec connecteur USB-C robuste et performant

Câble patient amovible avec 10 fils, testé pendant plus de 4000 cycles de connexion



Capteur SpO<sub>2</sub> sans fil, fixé pour la nuit

## DÉPISTAGE DES ÉPISODES RESPIRATOIRES

Grâce à l'enregistrement de la respiration dérivé de l'ECG (EDR), le medilogFD est en mesure de dépister des épisodes respiratoires potentiels pendant le sommeil. Le capteur SpO<sub>2</sub> en option, connecté via Bluetooth, permet d'obtenir des informations respiratoires supplémentaires.



**Americas**  
**SCHILLER Americas Inc.**  
 Doral, Florida 33172

**North America:**  
 Phone +1 786 845 06 20  
 Fax +1 786 845 06 02  
[sales@schilleramericas.com](mailto:sales@schilleramericas.com)  
[www.schilleramericas.com](http://www.schilleramericas.com)

**Latin America & Caribbean**  
 Phone +1 305 591 11 21  
 Fax +1 786 845 06 02  
[sales@schilleramericas.com](mailto:sales@schilleramericas.com)  
[www.schilleramericas.com](http://www.schilleramericas.com)



**France**  
**SCHILLER Médical**  
 F-67160 Wissembourg  
 Phone +33 3 88 63 36 00  
[info@schiller.fr](mailto:info@schiller.fr)  
[www.schiller.fr](http://www.schiller.fr)



**France (distribution France)**  
**SCHILLER France S.A.S.**  
 F-77608 Bussy St Georges  
 Phone +33 1 64 66 50 00  
[contact@schillerfrance.fr](mailto:contact@schillerfrance.fr)  
[www.schiller-france.com](http://www.schiller-france.com)



**Serbia**  
**SCHILLER d.o.o.**  
 11010 Beograd  
 Phone +381 11 39 79 508  
[info@schiller.rs](mailto:info@schiller.rs)  
[www.schiller.rs](http://www.schiller.rs)



**Slovenia**  
**SCHILLER d.o.o.**  
 2310 Slovenska Bistrica  
 Phone +386 2 843 00 56  
[info@schiller.si](mailto:info@schiller.si)  
[www.schiller.si](http://www.schiller.si)



**Asia**  
**SCHILLER Asia-Pacific / Malaysia**  
 52200 Kuala Lumpur, Malaysia  
 Phone +603 6272 3033  
[sales@schiller.com.my](mailto:sales@schiller.com.my)  
[www.schiller-asia.com](http://www.schiller-asia.com)



**Germany**  
**SCHILLER Medizintechnik GmbH**  
 D-85622 Feldkirchen b. München  
 Phone +49 89 62 99 81 0  
[info@schillermed.de](mailto:info@schillermed.de)  
[www.schillermed.de](http://www.schillermed.de)



**Spain**  
**SCHILLER ESPAÑA, S.A.**  
 ES-28232 Las Rozas/Madrid  
 Phone +34 91 713 01 76  
[schiller@schiller.es](mailto:schiller@schiller.es)  
[www.schiller.es](http://www.schiller.es)



**Austria**  
**SCHILLER Handelsgesellschaft m.b.H.**  
 A-4040 Linz  
 Phone +43 732 70 99 0  
[sales@schiller.at](mailto:sales@schiller.at)  
[www.schiller.at](http://www.schiller.at)



**India**  
**SCHILLER Healthcare India Pvt. Ltd.**  
 Mumbai - 400 059, India  
 Phone +91 22 6152 3333 / 2920 9141  
[sales@schillerindia.com](mailto:sales@schillerindia.com)  
[www.schillerindia.com](http://www.schillerindia.com)



**Switzerland**  
**SCHILLER Schweiz AG**  
 CH-8912 Obfelden  
 Phone +41 44 744 30 00  
[sales@schiller-schweiz.ch](mailto:sales@schiller-schweiz.ch)  
[www.schiller-schweiz.ch](http://www.schiller-schweiz.ch)



**China**  
**Alfred Schiller (Beijing) Medical Technology Co., Ltd.**  
 100102 Beijing, China  
 Phone +86 10 84565453  
[info@schillerchina.com](mailto:info@schillerchina.com)  
[www.schillermedical.cn](http://www.schillermedical.cn)



**Poland**  
**SCHILLER Poland Sp. z o.o.**  
 PL-02-729 Warszawa  
 Phone +48 22 843 20 89 / +48 22 647 35 90  
[schiller@schiller.pl](mailto:schiller@schiller.pl)  
[www.schiller.pl](http://www.schiller.pl)



**Turkey**  
**SCHILLER TÜRKIYE**  
 Okmeydani-Sisli - Istanbul  
 Phone +90 212 210 8681 (pbx)  
 Fax +90 212 210 8684  
[info@schiller.com.tr](mailto:info@schiller.com.tr)  
[www.schiller-turkiye.com](http://www.schiller-turkiye.com)



**Croatia**  
**SCHILLER d.o.o.**  
 10000 Zagreb  
 Phone +385 1 309 66 59  
[info@schiller.hr](mailto:info@schiller.hr)  
[www.schiller.hr](http://www.schiller.hr)



**Russia & C.I.S.**  
**AO SCHILLER.RU**  
 119049 Moscow, Russia  
 Phone +7 (495) 970 11 33  
[mail@schiller.ru](mailto:mail@schiller.ru)  
[www.schiller.ru](http://www.schiller.ru)



**United Kingdom**  
**SCHILLER UK Ltd.**  
 Anstruther, Fife KY10 3H  
 Phone +44 1333 312150  
[sales@schilleruk.com](mailto:sales@schilleruk.com)  
[www.schilleruk.com](http://www.schilleruk.com)

SCHILLER se réserve le droit de modifier la conception, les spécifications et les caractéristiques présentées, ou d'interrompre le produit décrit à tout moment sans préavis ni obligation. Les images peuvent être représentatives. L'illustration des câbles patient et le contenu de l'écran montrent le système à l'aide d'un câble CEI. Selon votre région, l'unité est fournie avec un câble patient AHA. Certains produits peuvent ne pas être autorisés par voie réglementaire ou mis en vente sur tous les marchés. Contactez votre représentant SCHILLER pour les informations les plus récentes et la disponibilité.



**SCHILLER**  
 The Art of Diagnostics