


# medilogFD

L'ECG Holter a 12 derivazioni per un monitoraggio completo della funzione cardiaca

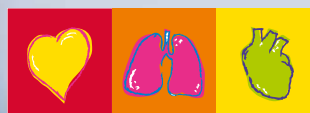


**SCHILLER**  
The Art of Diagnostics

# medilogFD

Il registratore Holter che completa la vostra gamma medilog:

- L'ECG Holter a 12 derivazioni consente di valutare dettagliatamente condizioni cardiache presenti nell'ECG
- Rilevamento istantaneo della fibrillazione atriale/flutter atriale basato sull'analisi dell'onda P reale
- Sensore SpO<sub>2</sub> opzionale per ulteriori informazioni respiratorie

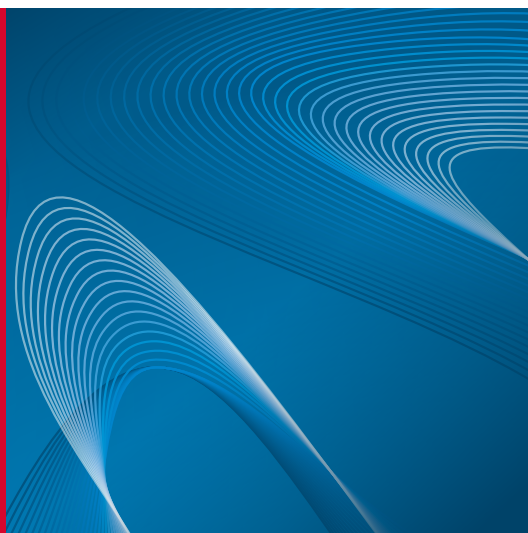

Custodia facile da pulire

## ECG HOLTER A 12 DERIVAZIONI PER UN'ANALISI ACCURATA

L'ECG Holter a 12 derivazioni è consigliato per un'analisi dettagliata e integrale del cuore. Medici, cardiologi ed elettrofisiologi possono contare su una tecnologia all'avanguardia:

- Valutazione regionale dell'ischemia miocardica. Distinzione tra regione anteriore, settale, laterale e inferiore nel contesto dinamico della vita quotidiana.
- Identificazione dell'origine dei battiti ectopici dal ventricolo destro o sinistro.

Eccellente nell'identificazione di battiti cardiaci anomali con origine nell'atrio destro o sinistro.

## COMPLETO DI ANALISI DELL'ONDA P IN TEMPO REALE E SOPPRESSIONE DEGLI ARTEFATTI

Il registratore Holter medilogFD possiede una frequenza di campionamento dell'ECG eccezionale di 128.000 Hz su 12 derivazioni.

L'elevata frequenza di campionamento, la sofisticata funzione di soppressione degli artefatti ed il rilevamento del movimento del paziente, consentono l'analisi dell'onda P in tempo reale, per una valutazione rapida, e più accurata dell'attività cardiaca.

## INFORMAZIONI DETTAGLIATE

Rilevamento istantaneo di fibrillazioni atriali insorgenti, analisi degli episodi respiratori e HRV ad alta risoluzione sono solo alcune delle eccezionali funzionalità di medilogFD.

## SOLUZIONE CON DOPPIA BATTERIA

La batteria interna di alta qualità si ricarica tramite USB o in modalità wireless attraverso una stazione di ricarica opzionale. Inoltre, è possibile utilizzare batterie standard AAA facilmente reperibili. In questa modalità, i pazienti possono essere sottoposti a screening fino a cinque giorni con una sola carica.

## COMPLETAMENTO DELLA GAMMA MEDILOG

medilogFD completa la vostra gamma medilog con medilogAR (ECG Holter a 3 derivazioni, fino a 14 giorni di autonomia) e medilog DARWIN2 (software di analisi ECG di alto livello).

Display a colori ad alto contrasto per un facile utilizzo. Anteprima ECG in tempo reale: 3 canali visualizzati simultaneamente, è possibile scorrere tra tutti i 12 canali.

Protetto dagli urti grazie al suo design robusto

Marcatori di posizione visibili e tattili per un facile collegamento del cavo paziente

Scambio di dati via USB con un connettore USB-C robusto e innovativo

Controllo del segnale multifattoriale in base a:

- Impedenza
- Ampiezza
- Quantità di rumore

Microfono per registrare l'ID del paziente. Quando la registrazione viene avviata in modo anonimo, è obbligatorio effettuare una registrazione vocale per evitare di confondere pazienti.

Pulsanti grandi e facili da usare

Ecologico: funzionamento con batteria interna ricaricabile o, se necessario, normali batterie AAA per essere sempre pronto all'uso

Cavo paziente con 10 fili rimovibile, testato per più di 4000 cicli di collegamento



Sensore SpO<sub>2</sub> wireless, collegato per la notte

## SCREENING PER EPISODI RESPIRATORI

Grazie alla registrazione delle respirazioni derivate dall'ECG (EDR), medilogFD è in grado di eseguire lo screening di potenziali episodi respiratori durante il sonno. Il sensore SpO<sub>2</sub> opzionale, connesso tramite Bluetooth, consente di ottenere ulteriori e cruciali informazioni dell'attività respiratoria notturna.





**Americas**  
SCHILLER Americas Inc.  
Doral, Florida 33172

**North America:**  
Phone +1 786 845 06 20  
Fax +1 786 845 06 02  
sales@schilleramericas.com  
www.schilleramericas.com

**Latin America & Caribbean**  
Phone +1 305 591 11 21  
Fax +1 786 845 06 02  
sales@schilleramericas.com  
www.schilleramericas.com



**Asia**  
SCHILLER Asia-Pacific / Malaysia  
52200 Kuala Lumpur, Malaysia  
Phone +603 6272 3033  
sales@schiller.com.my  
www.schiller-asia.com



**Austria**  
SCHILLER Handelsgesellschaft m.b.H.  
A-4040 Linz  
Phone +43 732 70 99 0  
sales@schiller.at  
www.schiller.at



**China**  
Alfred Schiller (Beijing) Medical Technology  
Co., Ltd.  
100102 Beijing, China  
Phone +86 10 84565453  
info@schillerchina.com  
www.schillermedical.cn



**Croatia**  
SCHILLER d.o.o.  
10000 Zagreb  
Phone +385 1 309 66 59  
info@schiller.hr  
www.schiller.hr



**France**  
SCHILLER Médical  
F-67160 Wissembourg  
Phone +33 3 88 63 36 00  
info@schiller.fr  
www.schiller.fr



**France (distribution France)**  
SCHILLER France S.A.S.  
F-77608 Bussy St Georges  
Phone +33 1 64 66 50 00  
contact@schillerfrance.fr  
www.schiller-france.com



**Germany**  
SCHILLER Medizintechnik GmbH  
D-85622 Feldkirchen b. München  
Phone +49 89 62 99 81 0  
info@schillermed.de  
www.schillermed.de



**India**  
SCHILLER Healthcare India Pvt. Ltd.  
Mumbai – 400 059, India  
Phone +91 22 6152 3333 / 2920 9141  
sales@schillerindia.com  
www.schillerindia.com



**Poland**  
SCHILLER Poland Sp. z o.o.  
PL-02-729 Warszawa  
Phone +48 22 843 20 89 / +48 22 647 35 90  
schiller@schiller.pl  
www.schiller.pl



**Russia & C.I.S.**  
AO SCHILLER.RU  
119049 Moscow, Russia  
Phone +7 (495) 970 11 33  
mail@schiller.ru  
www.schiller.ru



**Serbia**  
SCHILLER d.o.o.  
11010 Beograd  
Phone +381 11 39 79 508  
info@schiller.rs  
www.schiller.rs



**Slovenia**  
SCHILLER d.o.o.  
2310 Slovenska Bistrica  
Phone +386 2 843 00 56  
info@schiller.si  
www.schiller.si



**Spain**  
SCHILLER ESPAÑA, S.A.  
ES-28232 Las Rozas/Madrid  
Phone +34 91 713 01 76  
schiller@schiller.es  
www.schiller.es



**Switzerland**  
SCHILLER Schweiz AG  
CH-8912 Obfelden  
Phone +41 44 744 30 00  
sales@schiller-schweiz.ch  
www.schiller-schweiz.ch



**Turkey**  
SCHILLER TÜRKIYE  
Okmeydani-Sisli – Istanbul  
Phone +90 212 210 8681 (pbx)  
Fax +90 212 210 8684  
info@schiller.com.tr  
www.schiller-turkiye.com



**United Kingdom**  
SCHILLER UK Ltd.  
Anstruther, Fife KY10 3H  
Phone +44 1333 312150  
sales@schilleruk.com  
www.schilleruk.com

SCHILLER si riserva il diritto di apportare modifiche al design, alle specifiche e alle caratteristiche mostrate, o di interrompere il prodotto descritto in qualsiasi momento senza preavviso o obbligo. Le immagini potrebbero essere inserite a scopo illustrativo. L'illustrazione dei cavi paziente e dei contenuti dello schermo mostra un sistema che utilizza un cavo IEC. A seconda della vostra regione, l'unità può essere fornita con un cavo paziente AHA. Alcuni prodotti potrebbero non essere autorizzati per la vendita in tutti i mercati. Contattare il proprio rappresentante SCHILLER per le ultime informazioni sulla disponibilità.

