

medilogFD

12-odprowadzeniowy rejestrator EKG metodą Holtera
do przestrzennej analizy zdrowia serca




SCHILLER
The Art of Diagnostics

medilogFD

Rejestrator holterowski, który stanowi uzupełnienie linii produktów medilog:

- 12-odprowadzeniowy rejestrator EKG metodą Holtera umożliwia ocenę pełnego spektrum stanów EKG serca
- Natychmiastowe wykrywanie migotania/trzepotania przedsionków na podstawie rzeczywistej analizy załamka P
- Opcjonalny czujnik SpO₂ dostarcza dodatkowych informacji na temat oddychania

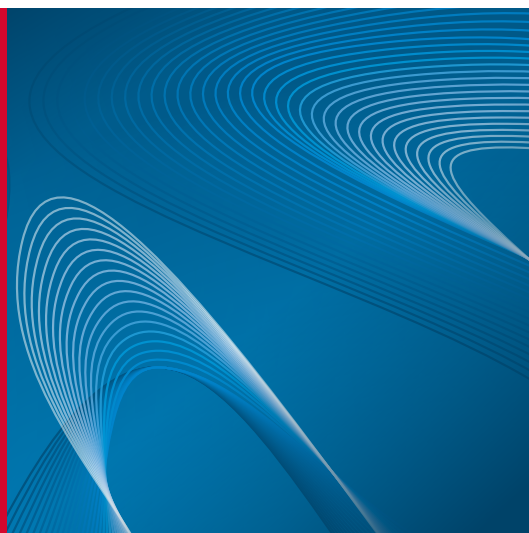

Łatwe do czyszczenia etui

12-ODPROWADZENIOWY REJESTRATOR HOLTEROWSKI DO ANALIZY PRZESTRZENNEJ

12-odprowadzeniowy rejestrator EKG metodą Holtera jest preferowany do szczegółowej i przestrzennej analizy serca. Lekarze, kardiolodzy i elektrofizjolodzy doceniają tę wiodącą w branży technologię:

- lokalna ocena niedokrwienia mięśnia sercowego, rozróżnianie obszaru przedniego, przegrodowego, bocznego i dolnego w dynamicznych warunkach codziennego życia
- identyfikacja pochodzenia pobudzeń ektopowych, niezależnie od tego, czy pochodzą z lewej, czy prawej komory

Doskonała identyfikacja nieprawidłowych uderzeń serca, które rozpoczynają się w prawym lub lewym przedsionku.

REDUKCJA ARTEFAKTÓW

Rejestrator holterowski medilogFD oferuje wyjątkową częstotliwość próbkowania 128 000 Hz w 12 kanałach, jak na poziomie spoczynkowego EKG. Można to wykorzystać do analizy załamków P w czasie rzeczywistym, zaawansowanego tłumienia artefaktów i wykrywania ruchu, co pozwala na szybką ocenę.

PODEJŚCIE CAŁOŚCIOWE

Natychmiastowe wykrywanie migotania przedsionków, analiza epizodów oddechowych i HRV o wysokiej rozdzielczości – to tylko niektóre z wyjątkowych cech urządzenia medilogFD.

KONCEPCJA DWÓCH BATERII

Wysokiej jakości wewnętrzny akumulator jest ładowany przez port USB lub bezprzewodowo za pomocą dodatkowej stacji ładowania. Można również stosować łatwo dostępne standardowe baterie AAA. Dzięki temu pacjenci mogą być monitorowani przez maksymalnie pięć dni na jednym ładowaniu.

KOLEJNE URZĄDZENIE Z LINII MEDILOG

medilogFD stanowi uzupełnienie linii medilog, która obejmuje medilogAR (3-odprowadzeniowy rejestrator holterowski EKG, czas pracy do 14 dni) i medilog DARWIN2 (wysokiej klasy oprogramowanie do analizy EKG).

Kolorowy wyświetlacz o wysokim kontraście ułatwiający obsługę. Podgląd EKG na żywo: 3 kanały wyświetlane jednocześnie, możliwość przewijania wszystkich 12 kanałów

Wieloczynnikowa kontrola sygnału oparta na:

- impedancji
- amplitudzie
- ilości szumu

Mikrofon do nagrywania danych identyfikacyjnych pacjenta. W przypadku anonimowego rozpoczęcia badania nagrywanie głosu jest niezbędne, aby zapobiec pomyleniu pacjentów.

Odporność na wstrząsy dzięki solidnej konstrukcji

Duże i łatwe w użyciu przyciski

Widoczne i wyczuwalne znaczniki położenia ułatwiające podłączenie kabla pacjenta

Przyjazny dla środowiska: zasilany z wewnętrznego akumulatora lub, w razie potrzeby, ze zwykłych baterii typu AAA, by zapewnić jak najszybsze uzyskanie wyniku

Wymiana danych przez USB z wytrzymałym, nowoczesnym złączem USB-C

Odłączany przewód pacjenta z 10 odprowadzeniami, przetestowany na ponad 4000 cykli połączeń



Bezprzewodowy czujnik SpO₂ zakładany na noc

MONITOROWANIE EPIZODÓW ODDECHOWYCH

Dzięki rejestrowaniu oddechu na podstawie EKG, urządzenie medilogFD może monitorować potencjalne epizody oddechowe w czasie snu. Opcjonalny czujnik SpO₂ podłączany przez Bluetooth dostarcza dodatkowych informacji na temat czynności układu oddechowego.



Americas
SCHILLER Americas Inc.
Doral, Florida 33172

North America:
Phone +1 786 845 06 20
Fax +1 786 845 06 02
sales@schilleramericas.com
www.schilleramericas.com

Latin America & Caribbean
Phone +1 305 591 11 21
Fax +1 786 845 06 02
sales@schilleramericas.com
www.schilleramericas.com



France
SCHILLER Médical
F-67160 Wissembourg
Phone +33 3 88 63 36 00
info@schiller.fr
www.schiller.fr



France (distribution France)
SCHILLER France S.A.S.
F-77608 Bussy St Georges
Phone +33 1 64 66 50 00
contact@schillerfrance.fr
www.schiller-france.com



Serbia
SCHILLER d.o.o.
11010 Beograd
Phone +381 11 39 79 508
info@schiller.rs
www.schiller.rs



Slovenia
SCHILLER d.o.o.
2310 Slovenska Bistrica
Phone +386 2 843 00 56
info@schiller.si
www.schiller.si



Asia
SCHILLER Asia-Pacific / Malaysia
52200 Kuala Lumpur, Malaysia
Phone +603 6272 3033
sales@schiller.com.my
www.schiller-asia.com



Germany
SCHILLER Medizintechnik GmbH
D-85622 Feldkirchen b. München
Phone +49 89 62 99 81 0
info@schillermed.de
www.schillermed.de



Spain
SCHILLER ESPAÑA, S.A.
ES-28232 Las Rozas/Madrid
Phone +34 91 713 01 76
schiller@schiller.es
www.schiller.es



Austria
SCHILLER Handelsgesellschaft m.b.H.
A-4040 Linz
Phone +43 732 70 99 0
sales@schiller.at
www.schiller.at



India
SCHILLER Healthcare India Pvt. Ltd.
Mumbai – 400 059, India
Phone +91 22 6152 3333 / 2920 9141
sales@schillerindia.com
www.schillerindia.com



Switzerland
SCHILLER Schweiz AG
CH-8912 Obfelden
Phone +41 44 744 30 00
sales@schiller-schweiz.ch
www.schiller-schweiz.ch



China
Alfred Schiller (Beijing) Medical Technology
Co., Ltd.
100102 Beijing, China
Phone +86 10 84565453
info@schillerchina.com
www.schillermedical.cn



Poland
SCHILLER Poland Sp. z o.o.
PL-02-729 Warszawa
Phone +48 22 843 20 89 / +48 22 647 35 90
schiller@schiller.pl
www.schiller.pl



Turkey
SCHILLER TÜRKIYE
Okmeydani-Sisli – Istanbul
Phone +90 212 210 8681 (pbx)
Fax +90 212 210 8684
info@schiller.com.tr
www.schiller-turkiye.com



Croatia
SCHILLER d.o.o.
10000 Zagreb
Phone +385 1 309 66 59
info@schiller.hr
www.schiller.hr



Russia & C.I.S.
AO SCHILLER.RU
119049 Moscow, Russia
Phone +7 (495) 970 11 33
mail@schiller.ru
www.schiller.ru



United Kingdom
SCHILLER UK Ltd.
Anstruther, Fife KY10 3H
Phone +44 1333 312150
sales@schiller.uk.com
www.schilleruk.com

Firma SCHILLER zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian projektowych, zmian specyfikacji i funkcji prezentowanych aparatów, a także do zaprzestania produkcji/dystrybucji opisanych produktów w każdej chwili bez wcześniejszej zapowiedzi i zobowiązań. Prezentowane zdjęcia aparatów mogą być jedynie poglądowe. Niektóre produkty mogą nie być certyfikowane i dopuszczone do sprzedaży na wszystkich rynkach. Skontaktuj się z najbliższym przedstawicielem firmy SCHILLER w celu uzyskania aktualnych informacji i potwierdzenia dostępności produktów.

